
DIASSALM
Diagnostic Semi-Solid Salmonella Agar

Halbfestes Nährmedium zum Nachweis von beweglichen Salmonellen aus Lebensmitteln und anderen Untersuchungsmaterialien

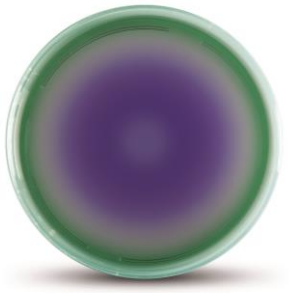

Zubereitung

28,6 g in 0,5 Liter Aqua dest. suspendieren, unter Rühren bis zum vollständigen Lösen erhitzen und auf 50 °C abkühlen. Nicht autoklavieren! Gegebenenfalls den Inhalt einer Flasche Novobiocin-Selektiv-Supplement (sifin Art.-Nr. TN1324) nach Vorschrift lösen und zugeben. Gut mischen und Platten gießen.

Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Inkubation: aerob, 42 ± 1 °C für 18-24 h (nicht länger als 24 h). Nährboden ist klar und dunkelgrün gefärbt.

Teststamm	**Inokulum** KBE ohne Novobiocin-Zusatz	**Inokulum** KBE mit Novobiocin-Zusatz	**Schwärmzone** Farbe
Salmonella Typhimurium ATCC 14028	50-100	50-150	deutlich blauviolette Schwärmzone
Salmonella Typhimurium ATCC 13311	50-100	50-150	deutlich blauviolette Schwärmzone
Salmonella Abony ATCC 6017	50-100	50-150	deutlich blauviolette Schwärmzone
Salmonella Enteritidis ATCC 13076	50-100	50-150	deutlich blauviolette Schwärmzone
Enterobacter cloacae ATCC 13047	50-150	ca. 1000	keine Schwärmzone
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	50-150	ca. 1000	keine Schwärmzone
Proteus mirabilis ATCC 29906	50-150	ca. 1000	keine Schwärmzone
Enterobacter aerogenes ATCC 13048	50-150	ca. 1000	keine Schwärmzone

Bestellinformation

Artikelnummer	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Inhalt**
TN1013	**DIASSALM** Diagnostic Semi-Solid Salmonella Agar	für 8,7 l Nährmedium (57,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1324	**Novobiocin-Selektiv- Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium)	12 x 1 Fl.

Datum der Fassung: 12/02/2020

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de