diagnostics
with passion



ChroMedium Coliforme
Chromogener Coliformen Agar, CCA

Chromogenes Nährmedium

Wasser-Analyse

Mikrobiologie

Chromogener Selektivagar zum selektiven Nachweis von *Escherichia coli* und coliformen Bakterien

- **Untersuchung von Wasser und verarbeiteten Lebensmitteln**
- **Trinkwasser-Analyse nach DIN EN ISO 9308-1**

  ChroMedium Coliforme (CCA) wird Lactose-TTC-Agar ablösen

  Sie erhalten beide Nährmedien bei uns
- **Die wichtigsten Spezies schnell bestimmen**

  E. coli

  Citrobacter


  Pseudomonas
- **Trockennährmedium**

  Inklusive chromogener Substanzen



sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de


ChroMedium Coliforme

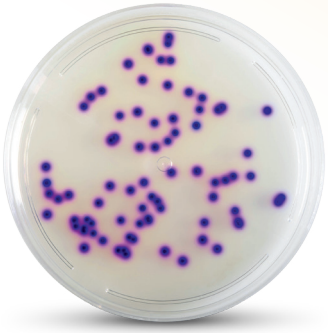

E. coli

Bezeichnung	Artikel	Inhalt
ChroMedium Coliforme (Chromogener Coliformen Agar, CCA)	TN1064	500 g Pulvernährmedium für 17,3 l Nährmedium, keine Zusätze erforderlich


Mikrobiologische Qualitätskontrolle

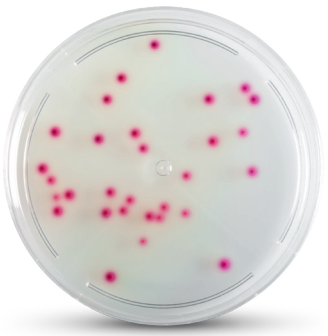

Citrobacter

Mikroorganismus	Wachstum	Koloniemorphologie
E. coli ATCC 25922, ATCC 8739, ATCC 10536	gutes Wachstum ≥ 70 %	dunkelblaue bis violette Kolonien
Citrobacter freundii ATCC 8090	gutes Wachstum ≥ 70 %	rosa bis rote Kolonien
Enterobacter aerogenes ATCC 27853	gutes Wachstum ≥ 70 %	rosa bis rote Kolonien
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	gutes Wachstum ≥ 70 %	farblose Kolonien
Proteus mirabilis ATCC 29906	gutes Wachstum ≥ 70 %	farblose Kolonien, im Schwärmen gehemmt
Enterococcus faecalis ATCC 19433	kein Wachstum	n.a.
Bacillus cereus ATCC 11778	kein Wachstum	n.a.

Inkubation: aerob, 21 ± 3 h bei 36 ± 1 °C

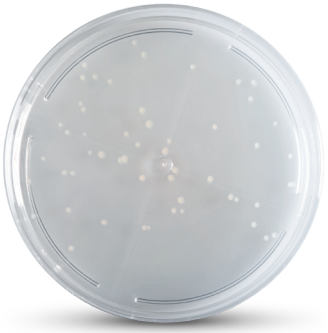

Pseudomonas

Lactose-TTC-Agar mit Teritol-7 ist bei uns weiterhin verfügbar:

Lactose-TTC-Agar mit Tergitol-7

Bezeichnung	Artikel	Inhalt
Lactose-TTC-Agar mit Tergitol-7	TN1278	500 g Pulvernährmedium für 9,4 l Nährmedium, keine Zusätze erforderlich

Datum der Fassung: 04/02/2020