
TESTSCHEMA FÜR DIE SEROTYPISIERUNG HÄUFIGER *SALMONELLA*-SEROTYPEN

diagnostics with passion

Empfehlung für den Einsatz von sifin Testreagenzien

Für die Objektträgeragglutination nach dem White-Kauffmann-Le-Minor Schema

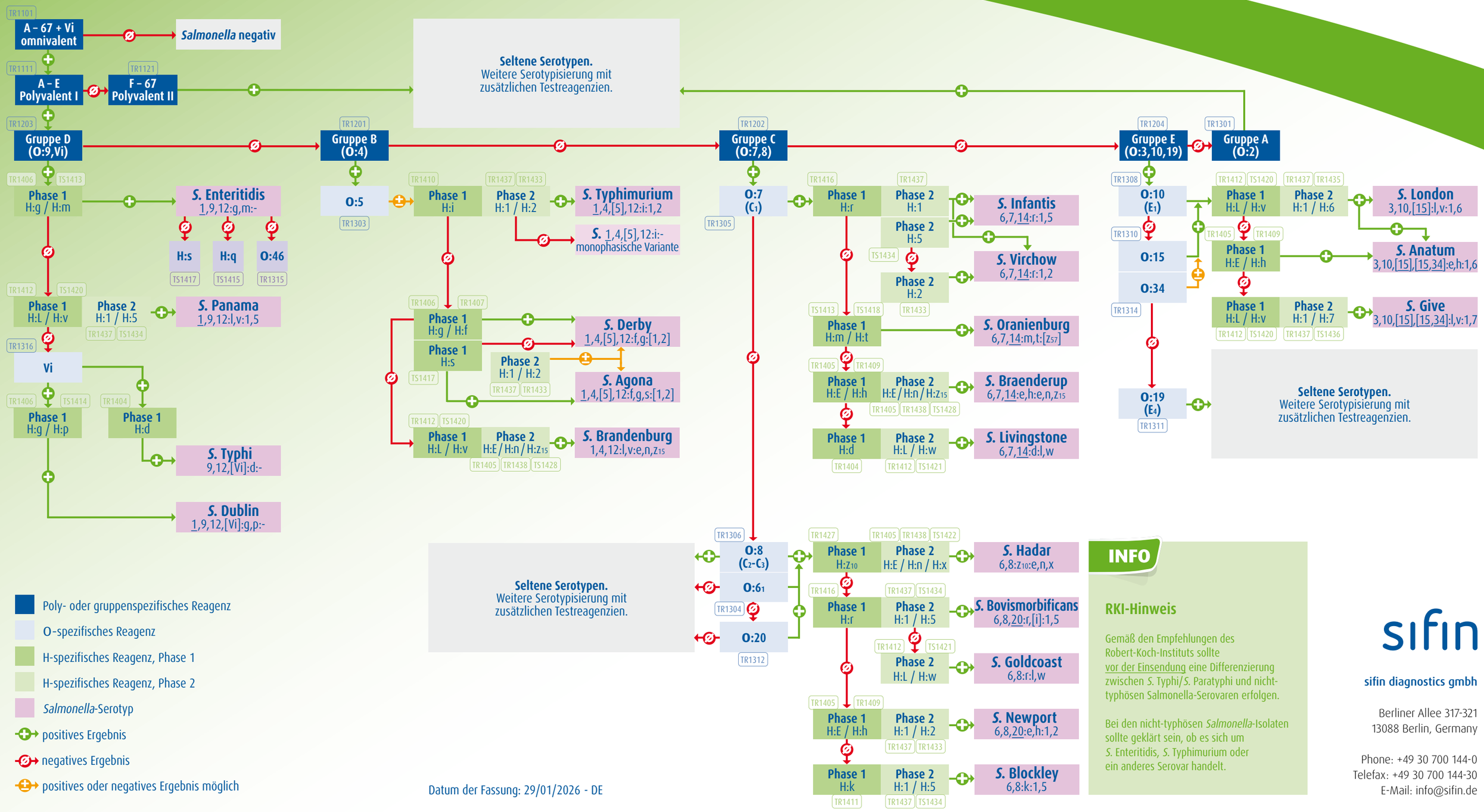

- Poly- oder gruppenspezifisches Reagenz
- O-spezifisches Reagenz
- H-spezifisches Reagenz, Phase 1
- H-spezifisches Reagenz, Phase 2
- *Salmonella*-Serotyp
- positives Ergebnis
- negatives Ergebnis
- positives oder negatives Ergebnis möglich

Datum der Fassung: 29/01/2026 - DE

INFO

RKI-Hinweis

Gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sollte vor der Einsendung eine Differenzierung zwischen *S.* Typhi/*S.* Paratyphi und nicht-typhösen Salmonella-Serovaren erfolgen.

Bei den nicht-typhösen *Salmonella*-Isolaten sollte geklärt sein, ob es sich um *S.* Enteritidis, *S.* Typhimurium oder ein anderes Serovar handelt.

sifin

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Germany

Phone: +49 30 700 144-0
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.de